



Le prime pubblicazioni scientifiche sulla criolipolisi risalgono al 2006, le varie tecniche e le tecnologie si sono evolute cercando di ottimizzare il rendimento terapeutico contestualmente alla riduzione degli esiti. Si è cercato, altresì, di minimizzare i disturbi provocati durante il trattamento dalla prolungata suzione (se utilizzata) e dall'ipotermia in una porzione di tessuto molto limitata.

L'evoluzione della metodica è ora rappresentata da:

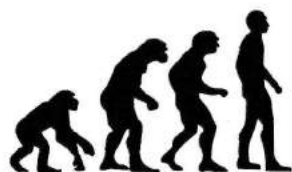

CRIOMED CRIOLIPOLISI A CICLO TERMICO

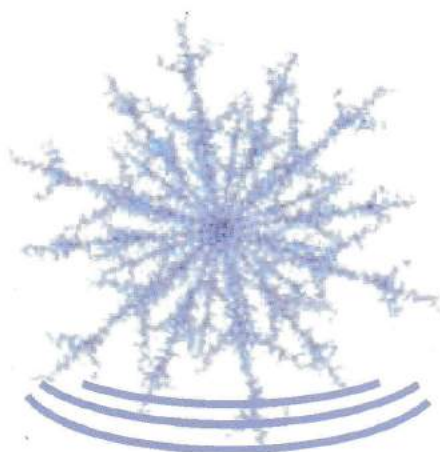

**Esclusiva sinergia
Crio
Elettroterapia**



Il trattamento prevede di:

1. alternare una fase di ipotermia ad una fase di "rilascio termico"

(lo stress ai vari livelli, procurato dal prolungarsi di una "situazione limite", porta i tessuti ad una condizione di "sofferenza" che predispone gli stessi a risposte anomale al trattamento .

*Un software, implementato nel sistema, gestisce autonomamente dei **cicli termici** che, basati su un accurato controllo delle temperature, alternano i "timing" nei quali la temperatura raggiunge e viene mantenuta ai livelli di ipotermia richiesti, per poi essere riportata a livelli di "normalità".*

I cicli termici, che si ripetono per 3 / 4 volte in ogni seduta di trattamento, non contribuiscono solamente alla riduzione degli stress indotti dalla metodica, ma introducono una "ginnastica vascolare" [vasocostrizione e vasodilatazione] che favorisce il metabolismo degli adipociti danneggiati).

2. dinamizzare l'apparato target della terapia

(per coerenza ad un approccio olistico di protocollo terapeutico, l'apparato muscolare dovrebbe essere coinvolto per contribuire al raggiungimento dei risultati evocati.

A questo fine viene introdotta una fase di trattamento con correnti eccitomotorie atte a:

- favorire la pompa muscolare [specialmente nel trattamento agli arti inferiori per ridurre il ristagno venoso linfatico]
- incrementare il tono muscolare
- ripristinare le varie funzionalità rallentate dalle basse temperature

La fase di trattamento con correnti eccitomotorie viene gestita senza l'intervento dell'operatore)



Esclusiva sinergia
Crio
Elettroterapia



3. estendere la superficie di trattamento

(il ridotto apporto di "stress" permette di estendere la superficie dei distretti interessati al trattamento. Tutte le funzioni dei quattro applicatori (130 x 90 mm) vengono modulate ed adattate autonomamente al soggetto sottoposto al trattamento dal controller implementato a bordo del sistema. Questo consente di operare con la massima sicurezza anche su zone ampie e/o non omogenee, in quanto ogni singolo applicatore viene "adattato" alle esigenze di terapia.

Va sottolineato che il trattamento è indicato per ridurre adiposità localizzata e non può sostituire un regime dietetico.



Esclusiva sinergia
Crio
Elettroterapia


Le dimensioni degli applicatori consentono il trattamento di ampi distretti



**Terapie non operatore
dipendenti su:
addome
arti inferiori
glutei
arti superiori**



**Applicatore mobile
per trattamenti
su piccoli distretti
quali viso
braccia ecc..**

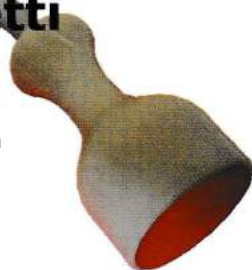

**Quattro applicatori per
terapie a «MANI LIBERE»**

- tonificazione tessuti superficiali
- riduzione delle adiposità localizzate con modellamento dei volumi
- rassodamento profondo dei muscoli interessati
- miglioramento del microcircolo grazie alla ginnastica vascolare indotta dall'alternanza ipo-iper/termia



Esclusiva sinergia
Crio
Elettroterapia



Questo applicatore è dotato di una tecnologia esclusiva denominata:
«**DOUBLE-FREQUENCY HEAT CYCLE**».

La sofisticata tecnologia permette di effettuare terapie con cicli termici molto veloci nei quali, durante le due fasi di ipertermia e ipotermia, vengono erogate due diverse frequenze di elettroterapia.

Viso

- miglioramento della tonicità cutanea
- riduzione doppio mento
- azione anti-age

Corpo

- tonificazione tessuti superficiali
- riduzione delle adiposità localizzate con modellamento dei volumi
- rassodamento profondo dei muscoli interessati
- miglioramento del microcircolo grazie alla ginnastica vascolare indotta dall'alternanza ipo-iper/termia

